

# 取扱説明書



## TB-1598 Cooper (クーパー)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

<b>警告</b>	ご使用の前には本取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。誤った取扱いをされると重大な事故や怪我の原因になります。
	濡れた手で充電ポート、電源スイッチなどの電気部品に触れないでください。 また、本体を水に浸したり掛けたりしないでください。感電や事故の原因になります。
	連続1時間以上のご使用はおやめください。約1時間連続でご使用されたのちは、必ず30分の休止を実施してください。
	15歳未満のお子様や介助が必要な方および電化製品の取扱い経験が少ない方のみでのご使用はおやめください。 ご使用方法、危険性を十分ご理解された方の指導管理の下一緒にご使用ください。
	ご使用にならないときは、本製品をお子様の手が届かない場所に保管してください。
	本機は筋肉のみに使用してください。特に下記には絶対に使用しないでください。 顔・目・生殖器・外傷がある箇所・皮膚の薄い箇所・骨や関節に近い箇所。
	充電は本製品に付属しているUSBコード・Type-Cをご使用ください。また他の製品に使用しないでください。感電や火事の原因となります。 ※ACアダプターは付属しておりません。お手元に携帯電話用のUSB充電アダプター(5V/2A)をお持ちでなければ別売のUSB充電ACアダプター(TB-1615)をお買い求めください。
	いかなる理由があっても本製品の修理・分解・改造は絶対におやめください。重大な事故や怪我の原因になります。 修理・分解・改造をした製品または形跡のある製品は保証の対象外となります。
	誤った使用法は重大な怪我の原因になります。
	本体や充電ポートなどを水などの液体に絶対浸さないでください。
	本製品はリチウムイオンバッテリーが内蔵されており、充電をして使用する機器です。 充電電池は経年使用により劣化し、フル充電後の使用回数が減少しますが故障ではありません。
	痛みや不快感を感じたら、ご使用をすぐに中止して医師の診察を受けてください。
	下記の方は医師に相談し、医師の判断に基づいてご使用ください。 妊娠中の方。神経疾患や網膜疾患(症候群)の方・ペースメーカーをご使用中の方・てんかんまたは片頭痛の方 椎間板ヘルニア、脊椎すべり症または類する症状をお持ちの方・骨折、関節に対しての術後間もない方。
人の筋肉のみにご使用ください。物や動物など人間の筋肉以外へのご使用は絶対におやめください。	
本製品は治療を目的とした、マッサージ機・マッサージ器・マッサージャー・マッサージガンではありません。 一般家庭用の運動補助器です。業務用としてのご使用はお控えください。 ※本製品はバイブレーションによるストレッチを目的としています。医療用機器ではありません。	

<b>注意</b>	本製品を使用する際は、乾いた衣服の表面で、優しく移動させるようにしてください。
	本体はぬるま湯で濡らした柔らかい布を硬く絞って拭いてください。 その後乾いた柔らかい布でしっかりと水気を拭き取ってください。アルコール性の薬剤でのお手入れはおやめください。
	使用される部位、強度、使用時間の組み合わせなどにより、皮膚表面を損傷させる可能性があります。 使用部位を常にチェックし痛みや不調があれば、すぐに使用を中止してください。

## 各部の名称及び使用方法

● ご使用前に必ずお読みください。



※充電中は「電源ランプ」が「赤」色に灯ります。

※「充電ランプ」が「白」色になると充電が完了している状態です。

## 交換可能なアタッチメント




ボールヘッド  
各部位に適する  
手足等



フラットヘッド  
各部位のリラックス



バレットヘッド  
深層皮膚のストレッチ  
関節等

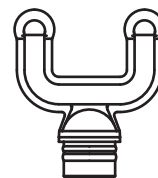

フォークヘッド  
首や背骨等



## 基本仕様

外形仕様	幅 7.5×奥行 3.8×高さ 13cm (アタッチメント付属なし時)	バッテリー容量	2000mAh
重量	約 400g (アタッチメント付属なし時)	フル充電所要時間	約 3～4 時間
ご使用可能時間	約 8 時間 (レベル 1 にてご使用の場合)	材質	アルミ合金・リチウムイオン電池 モーター・PCB
電源	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC5V 2A 定格電力：16W	振動回数	レベル 1：1,800(±10%) 回/分 レベル 2：2,600(±10%) 回/分 レベル 3：3,200(±10%) 回/分

## ご使用になる前に

- ①ご使用になる前に約3時間程度充電をし、充電ランプが「白」色に点灯した状態を確認してからご使用ください。
- ②充電しながら本製品はご使用できません。工場出荷時のバッテリーはフル充電されていません。ご使用前に充電してください。

## ご使用方法

- ①本体が十分充電されていることを確認してください。
- ②電源を入れる：(電源 ) ボタンを2秒長押し、電源を入れます。
- ③振動を調節する：電源を入れたのち、ボタンを短く押ししてください。ワンプッシュごとにレベルが1段階ずつ変化します。レベル3のつぎは、レベル1へ戻ります(順番に繰り返す)。  
※約10分間連続で使用されますと、一旦自動で電源が切れます。
- ④(電源 ) ボタンを2秒長押しすると、電源が切れます。

## 充電方法

- ①ACアダプターは付属しておりません。USB充電アダプター(5V/2A)にて充電する仕様です。  
※定格出力DC5V 2AのACアダプターを推奨いたします。  
2A未満のアダプターでもご使用になれますが、充電時間が長くなります。  
また、2Aを超えるものはご使用しないでください。  
※お持ちでない場合、(TB-1615・USB充電アダプター/別売)もご用意しております。
- ②10%以下になると、電源ランプが赤色に点滅します。  
その際は、なるべく早く充電を実施してください。  
※バッテリーの劣化を防ぐためです。

## 保証書・保証規定

1	本保証規定は、ご購入から1年間において取扱説明書上の取扱方法、注意事項に従った正常な使用状態で製造上の欠陥・商品の素材の不良によって故障が生じた場合に無償修理もしくは交換をお約束するものです。 また当社の責任範囲は、この保証書に定める内容に準じた修理及び交換に限ります。
2	保証期間はご購入から1年間有効とします。
3	本保証規定によって修理・交換をされる際の保証期間は当初ご購入日から起算して1年となります。 保証を受けられた後の保証期間の延長はありません。
5	保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合は -製品と保証書を添えてお買い上げの販売店にご連絡の上、修理及び交換のお問い合わせを行ってください。 -修理受付時の代替品のお貸出しは行っておりません。 -本製品の使用、または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中断、製品不良や使用時の不注意に起因する損害及び、その他の金銭的損害を含む)に関しては免責とさせていただきます。
6	保証期間内であっても次の事項に該当する場合は保証の対象外とさせていただきます。 -如何なる理由を問わず、分解された場合、分解された形跡がある場合。 -お買い上げ後(通販の場合は到着後からの適用)の輸送・移動・落下などにより、故障及び破損が生じた場合。 -火災・地震・水害・落雷・天変地変などによる、故障及び破損が生じた場合。 -他社の取り扱いもしくは再販もしくは転売された商品である場合。 開封の有無に関わらず輸入元出荷前の検品をした状態を保たれていない可能性があるため保証対象外となります。

ご購入日

年

月

日

保証期間：ご購入から1年間

本保証書は日本国内のみ有効です。本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。  
また、保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。  
本保証書は明示した期間内に、保証規定に記載のもとにおいて無償修理及び交換のお約束をするものです。  
本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などご不明な場合は、以下販売元へお問い合わせください

株式会社 高田ベッド製作所

輸入元：株式会社ジェーシーフレンド

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27  
TEL. 072-484-8800 (代)  
URL <http://www.takada-bed.co.jp/>  
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382